

# Прибор мягкой теплоты

(для 3-х сферного прожектора)

CGN-120-2AB

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Перед использованием внимательно прочтите инструкцию



# Меры безопасности

Пожалуйста, немедленно прекратите использование массажера при обнаружении нижеперчисленных признаков, во избежание поломки или несчастного случая. Выключите питание, извлеките вилку из эл.розетки и свяжитесь с сервисным центром для консультации и ремонта. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать изделие.

- Если мат поврежден.
- Если поврежден сетевой шнур или вилка.
- Если присутствует запах гари или от изделия исходит дым.

- ◆ Используйте прибор по назначению.
- ◆ Рекомендуемое время одноразового применения 15-30 минут.
- ◆ Не используйте прибор вне помещений и при окружающей темп. более 40°С.
- ◆ Не используйте мат во влажном или пыльном помещении.
- ◆ Подключайте мат к эл.розетке только надлежащего эл.питания (220В/50Гц).
- ◆ Не оставляйте изделие без присмотра во включенном состоянии.
- ◆ Держите прибор вдали от детей.
- ◆ Аккуратно обращайтесь с эл.кабелем, чтобы его не повредить.
- ◆ Не поднимайте массажер держа его за эл.кабель.
- ◆ Не используйте изделие, если внешнее покрытие повреждено или в случае механического или электронного сбоя. Свяжитесь с центром обслуживания.

## Особенности и применение

- Специальный дизайн позволяет эффективно использовать мат как самостоятельно, так и с 3-х сферным прожектором.
- Встроенные медальоны из нифрита, повышают эффективность прогрева ИК теплом и прижигания.
- 2 режима температуры 35-40°С и 65-70°С.
- Можно прогревать различные участки тела в течение 15-30 минут.
- **Основное назначение** - сидя на мате с использованием 3-х сферного прожектора (не входит в комплектацию).

## Эффективность

- Снимает мышечные боли и скованность в бедрах и ягодицах.
- Улучшает кровообращение тазобедренного сустава и ног.
- Профилактика и лечение гемороя.
- Профилактика заболеваний тазобедренных суставов.
- Нормализуется подача кислорода в клетки.
- Улучшает выведение вредных токсинов.
- Способствует восстановлению нервных волокон сидалищного нерва.

## Ограничения в использовании

Это изделие не предназначено для использования взрослыми людьми (включая детей) с ограниченными физическими или умственными способностями. Массажер может использоваться только под наблюдением взрослых. Если у вас сильные боли при использовании изделия, проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом. Рекомендуемое время использования 15-30 минут. Во время использования устанавливайте комфортную температуру во избежание ожогов.

## Технические параметры


Наименование	Прибор мягкой теплоты для 3-х сферного прожектора
Электрическое напряжение	220В / 50 Гц
Потребляемая мощность	45 Ватт
Нагревательный кабель	Без излучения электромагнитных волн
Габариты	450мм X 450мм
Диапазон используемых температур	20°C – 70°C

## Предостережения перед использованием

1. Внимательно читайте инструкцию
2. Пользуйтесь прибором на ровной поверхности
3. Подключайте прибор к напряжению 220В/50Гц

## Порядок использования

1. Подсоедините мат к контроллеру
2. Подключите вилку к эл.розетке 220В.
3. Настраивайте желаемую температуру при помощи ползунка (2 режима).
4. Сядьте на мат или прогревайте другие части тела.

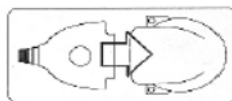

## Уход и хранение

1. Всегда отключайте мат, когда он не используется.
2. Если прибор сильно загрязнен, протрите салфеткой, смоченной водой или нейтральным моющим средством. Затем протрите сухой салфеткой. Не погружайте мат в воду.
3. Не проливайте воду или другие жидкости на мат.
4. Используйте пылеуловитель, чтобы чистить пыль между нефритовыми камнями.
5. Храните прибор в сухом прохладном месте.
6. Избегайте прямого воздействия солнечных лучей, высокой температуры, аэрозолей и влажности.

Производитель: ZHEJIANG MEDICINES & HEALTH PRODUCTS I/E CO., LTD., ZMC BUILDING, 101-2, N.ZHONGSHAN ROAD, HANGZHOU, 310003, CHINA

По заказу: ООО "Лотос", 119602, Москва, ул. Академика Анохина-38/1, www.llotus.ru

**К**омпания предоставляет гарантию на продукцию в соответствии с законом по защите прав потребителя.

Если возникли какие-либо проблемы с продукцией, позвоните в демонстрационный центр, в котором вы приобрели данное оборудование.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный ремонт изделия осуществляется в течение 1 года. Продолжительность гарантии может быть ограничена, если массажер использовался в коммерческих целях.

НАИМЕНОВАНИЕ: *Прибор мягкой теплоты*

МОДЕЛЬ: **CGN-120-2AB**

ПОКУПАТЕЛЬ: \_\_\_\_\_

ДАТА ПОКУПКИ: \_\_\_\_\_

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ: \_\_\_\_\_

АДРЕС: \_\_\_\_\_

ТЕЛЕФОН: \_\_\_\_\_

ПЕЧАТЬ ПРОДАВЦА

Исправленное изделие в полном комплекте, с руководством по эксплуатации получил, с условиями гарантии ознакомлен и согласен.

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ: \_\_\_\_\_

-----  
Заполняется фирмой-продавцом

Гарантия не распространяется в следующих случаях.

1. В случае нарушений правил и условий эксплуатации.
2. Если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта.
3. Механические повреждения.
4. Повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей и насекомых.
5. Повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами.